



AQUARIUS® LT

ラボリー ウロダイナミックシステム アクエリアス LT



edap tms
Bringing New Horizons to Therapy


エダップテクノメド株式会社

アクエリアスLTの紹介

アクエリアスLTはコンピューター技術とデジタルテクノロジーを備えた次世代の下部尿路検査装置です。尿流測定、膀胱内圧測定をはじめプレッシャーフロースタディー、尿道内圧測定までウロダイナミクス検査をサポートするとともに下部尿路の診断に必要なデータが容易に入手できます。

検査測定プログラム

ウロフロメトリー（尿流測定）
シストメトリー（膀胱内圧測定）
プレッシャーフロースタディー
UPP（尿道内圧測定）
EMG（括約筋筋電図測定）

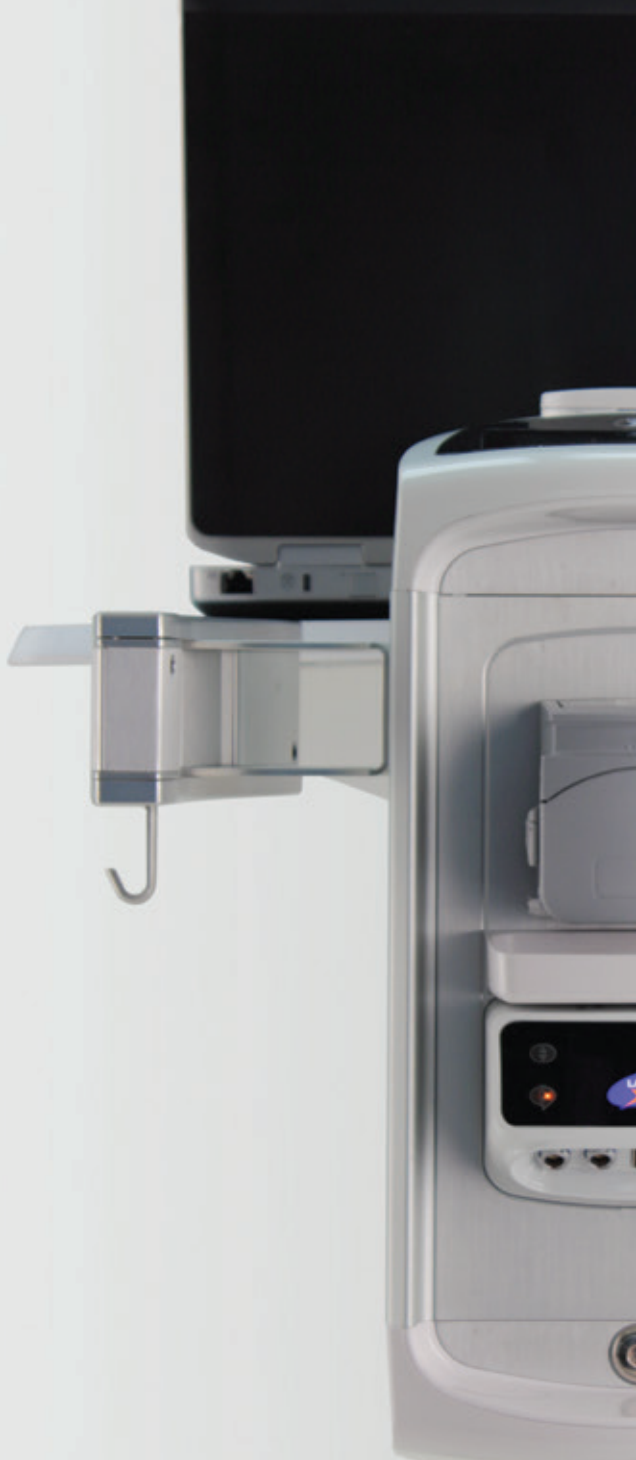

モジュールタイプ



セントラルハブは、タッチパネルで各モジュールを管理。

ウロキャップ フローセンサーは、アクエリアスシステムプラットフォーム内に収納されるように設計されています。

ポンプモジュールは、静音化テクノロジー、幅広い流量、複数のキャリブレーションの保存を特徴としています。

アクエリアスプラットフォーム テクノロジー

品質・イノベーション・サービス、そして満足度

アクエリアスのプラットフォームはユーザ、臨床現場からのニーズ、フィードバックを考慮し研究開発されました。

業界初の完全モジュール式製品パッケージでユーザ満足度の高い製品のご提供が可能となりました。



測定システムの要となるロームDX。

インフュージョントランスデューサーにより、精度と手順効率を向上させます。

UPXワイヤレスプレーは完全なワイヤレス操作を実現。スタンドアロン式、またはアクエリアスシステムにブラケット取り付けすることでご利用になれます。

ユーザフレンドリー・ ソフトウェアソリューションと情報管理

ソフトウェアソリューション

1984年、Laborie社はコンピュータ化ウロダイナミクス検査装置を世に送り出し、30年以上高性能ソフトウェアツールの研究開発に取り組んでいます。UDS120™とi-LIST™は包括的ウロダイナミクスソフトウェアパッケージとしてハイレベルな機能をご提供します。

■ユーザフレンドリー

使いやすいタッチスクリーンのセントラルハブ、音声ガイダンス、カスタマイズされたリモートコントロールはシンプルで使い易く設計されています。

■情報管理とセキュリティ

診察の予約、過去の診察内容、患者情報、検査データの管理をすることで安全性と効率性を両立します。

カスタマイズ性の高いユーザーインターフェースとレポートングツール (i-LIST™) で診察を強力にサポートします。



製造販売認証番号: 227ADBZX00187000



製造販売元: エダップテクノメド株式会社

www.edaptechnomed.co.jp

東京本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-17
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-3-10
福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠115-3-4

Tel 03-5540-6767 Fax 03-5540-6785
Tel 06-6304-0960 Fax 06-6304-0876
Tel 092-600-7155 Fax 092-600-7166