

ROCAMED 


# BI-FLEX EVO

尿管アクセスシース



edap tms  
Bringing New Horizons to Therapy

エダップテクノメド株式会社

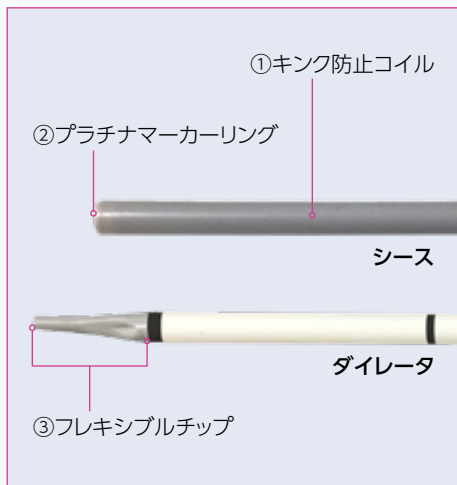

### ⇒ シースとダイレータの特徴

#### ①キンク防止コイル


シースはキンク防止スチール製コイルにより、強度と安定性をもたらし、内視鏡を容易に挿入・抜去できます。

#### ②プラチナマーカールリング

透視下で先端位置を確認できます。


#### ③テーパ型フレキシブルチップ

曲がりくねった尿管でも安全に通過出来るよう、テーパ型フレキシブルチップを採用。

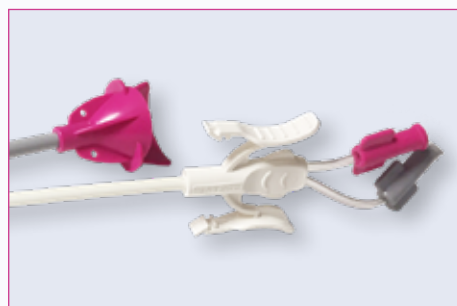

### ⇒ 2つのワーキングルーメン

それぞれ3Frのワーキングルーメンが2つあり、接続部分はルアー式。セーフティーガイドワイヤの使用と造影剤の注入が可能です。

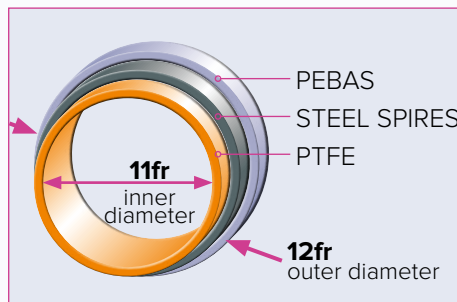

### ⇒ 大きな内径

10/12サイズのバイフレックスシースの内径は11Fであるため、碎石後の抽石が行いやすいだけでなく腎内圧を低く、そして灌流量は多くすることができます。

### 製品情報

商品コード	商品名	JAN	包装単位	一般的名称・クラス分類など
ROUS1035EV	バイフレックス尿管アクセスシースEVO 35cm 10/12	4582323371976	1本/箱	一般的名称:尿管向け泌尿器用カテーテル、 自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器 JMDNコード:34926012、38821001 償還区分:135尿路拡張用カテーテル(1)尿管用 クラス分類:II
ROUS1235EV	バイフレックス尿管アクセスシースEVO 35cm 12/14	4582323371983		
ROUS1045EV	バイフレックス尿管アクセスシースEVO 45cm 10/12	4582323371990		
ROUS1245EV	バイフレックス尿管アクセスシースEVO 45cm 12/14	4582323372003		

製造販売認証番号:301AFBZX00020000



製造販売元:エダップテクノメド株式会社

[www.edaptechnomed.co.jp](http://www.edaptechnomed.co.jp)

東京本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-17  
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-3-10  
福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川5-3-4

Tel 03-5540-6767 Fax 03-5540-6785  
Tel 06-6304-0960 Fax 06-6304-0876  
Tel 092-600-7155 Fax 092-600-7166