

ワイヤレスウロフロメーター



全自動尿流量計

# FlowMaster

フローマスター



edap tms  
Bringing New Horizons to Therapy

エダップテクノメド株式会社

# コンピューターベースによるウロフロー検査 フロームスター

## 検査測定項目

Average flow rate	平均尿流率(ml/sec)*
Maximum flow rate	最大尿流率(ml/sec)*
Time to maximum flow	最大尿流率到達時間(sec)
Voided volume	総排尿量(ml)*
Flow time	実排尿時間(ml)*
Voiding time	排尿時間(sec)*
Intervals	排尿回数
Delay time	ためらい時間(sec)**

注：\* 小数点第一位表示  
\*\* マニュアルモード

## 仕様・規格

### 尿流量率

測定レンジ	0~50 ml/sec
スケール	25/50 ml/sec

### 排 尿 量

測定レンジ	0~1000 ml
-------	-----------


## コンピューターによる患者データベース

パソコン・プリンターと接続し、患者ごとに測定データを保存し、表示・印刷が可能です。  
コンピューターにより測定のスケジュール管理が可能で自動的にON/OFFされます。

## 検査のスタート・ストップ

排尿を感知すると自動的に測定が開始され、パソコンを使用中でもバックグラウンドで記憶されます。  
排尿終了後自動的に検査は終了できます。(ポストフロータイムを選択できます。)

### ■ プリントアウト図

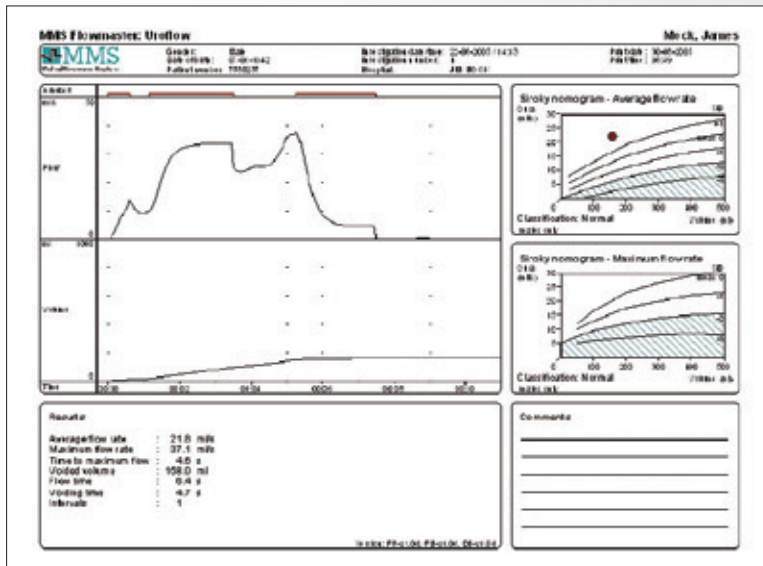

### ■ 構成・付属品

フローセンサー	1
解析用PCシステム周辺装置	1
電源アダプター	1
ピーカー・ロート・スプラッシュガード	1
フロースタンド	1
椅子式排尿架台	1

診療報酬点数 D242 尿水力学的検査 尿流測定 205点

JANコード:4582323370313 JMDNコード:36337000 クラス分類: I

製造販売届出番号: 13B1X00113000008

製造販売元: エダップテクノメド株式会社  
[www.edaptechnomed.co.jp](http://www.edaptechnomed.co.jp)

東 京 本 社 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-17 Tel 03-5540-6767 Fax 03-5540-6785  
大 阪 営 業 所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-3-10 Tel 06-6304-0960 Fax 06-6304-0876  
福 岡 営 業 所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川15-3-4 Tel 092-600-7155 Fax 092-600-7166

※本カタログに掲載した製品の仕様、外観は予告なく変更することがあります。

