


Quanta System
LASER IN OUR DNA

Cyber BLADE™

モーセレータシステム

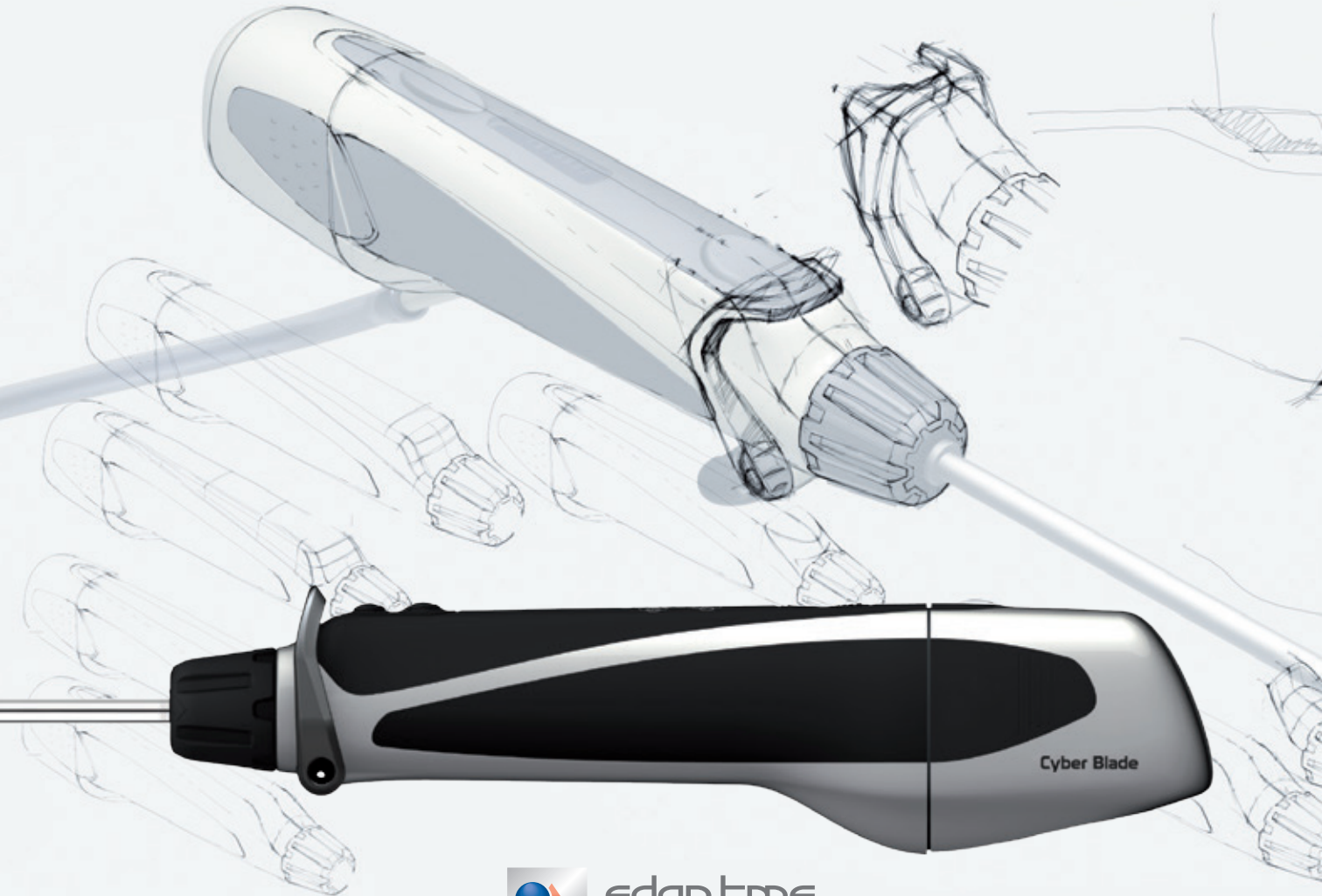

edap tms
Bringing New Horizons to Therapy

エダップテクノメド株式会社

コードレス式ディスポーザブル・モーセレータシステム 組織を迅速に排出します。



再処理の手間とコストを 抑えます



メンテナンス軽減

コードレス

- 全ての操作が術者の手元で制御可能
- 人間工学に基づいた軽量で使いやすい設計
- 吸引、及び電源のコンソールが不要

簡便なキット

1回の治療に必要な材料がすべてセットになっています。
(本体、ティッシュコレクター、専用チューブ)

ディスポーザブル

処置を完了したら、本体を廃棄
することができ、再処理の手間
がかかりません。



ブレード設計

- ブレードの摺動動作
- 捕まえた組織等を保持しやすい設計

Cyber Bladeモーセレータの特徴

初期投資を抑えられます



汚染リスクの軽減



治療あたりの
費用が固定



持ち運びが容易



充電式モータ以外は
ディスプレイザブルのため
再滅菌の時間がゼロ



毎回新品のブレードで
切れ味が保たれます



吸引調節スライダ

ブレード起動ボタン

主電源およびブレード速度の調節



再利用可能な充電式モータ

- ハイパワーモータ
- 再充電可能バッテリー

吸引コネクタ

- 様々な吸引システムに接続が可能な円錐型のコネクタ

仕様

モデル	Cyber BLADE™ モーセレータシステム
分類	充電式システム
モーセレータ本体の寸法	610 x 55 x 38 mm
ブレード長	378 mm
ブレード径 (外径)	4.5 mm (13.5 Fr)
充電ステーション・電気要件	100/220 Vac、50/60 Hz
ハンドピース用バッテリー	再充電可能 14.8v 電池

Quanta Cyber Bladeモーセレータ スタートアップキット JANコード : 4582323373017

商品番号	構成品	個別コード	入数	JANコード	JMDNコード
CVA000001	充電ステーション	EAM001421	1	4582323373031	35326002
	充電式モータ	EAM001420	2	4582323373048	
	組織細切除去装置	PMMS00001	5	4582323373055	
	専用チューブ	ABM000091	5	4582323373062	
	ティッシュコレクター	AAM000030	5	4582323373079	

Quanta Cyber Bladeモーセレーション セット JANコード : 4582323373024

商品番号	構成品	個別コード	入数	JANコード	JMDNコード
CVA000002	組織細切除去装置	PMMS00001	5	4582323373055	35326002
	専用チューブ	ABM000091	5	4582323373062	
	ティッシュコレクター	AAM000030	5	4582323373079	

認証番号: 302AHBZX00003000 一般の名称: 内視鏡用能動切除器具 (JMDNコード: 35326002)
管理医療機器 特定保守管理医療機器 クラスII

※本カタログに掲載した製品の仕様、外観は予告なく変更することがあります。



edap tms
Bringing New Horizons to Therapy



製造販売元: エダップテクノメド株式会社

www.edaptechnomed.co.jp

東京本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-17
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-3-10
福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川5-3-4

Tel 03-5540-6767 Fax 03-5540-6785
Tel 06-6304-0960 Fax 06-6304-0876
Tel 092-600-7155 Fax 092-600-7166

※本カタログに掲載した製品の仕様、外観は予告なく変更することがあります。 CB202007